


# bathmate®

J U S T   A D D   W A T E R

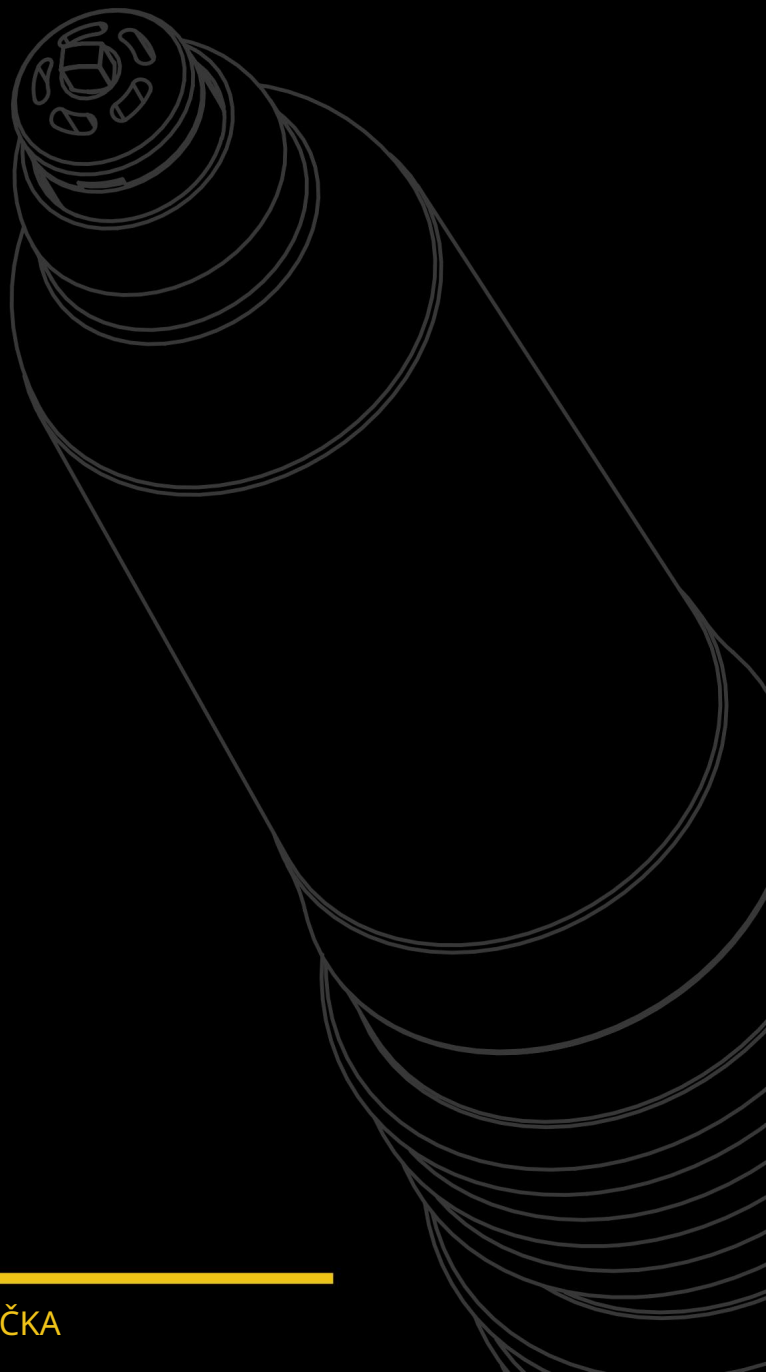


---

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


# JAK POUŽÍVAT HYDROPUMPU

Používejte prosím tuto vizuální příručku ve spojení s pokyny na následujících stránkách. To vám umožní využít maximální potenciál vašeho hydročerpadla.

## VAŠE HYDROČERPADLO

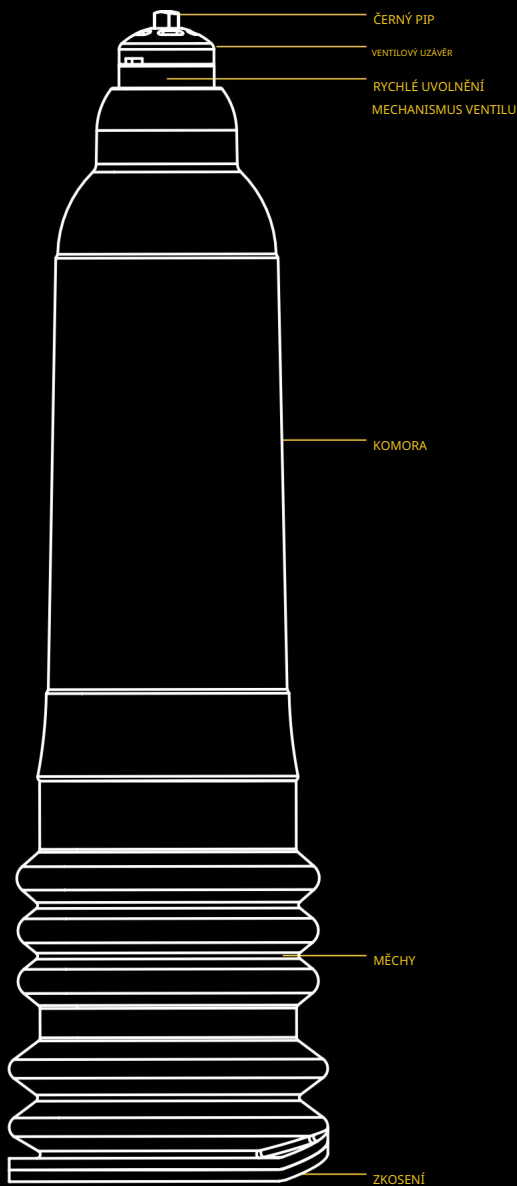


## POLOHY VENTILŮ

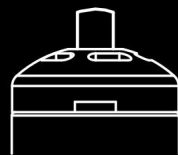


STLAČENÍ VENTILOVÉHO UZÁVĚRU PROTI PRUŽINĚ AKTIVUJE RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM MECHANISMUS A UVOLŇUJE PODTLAKO

2

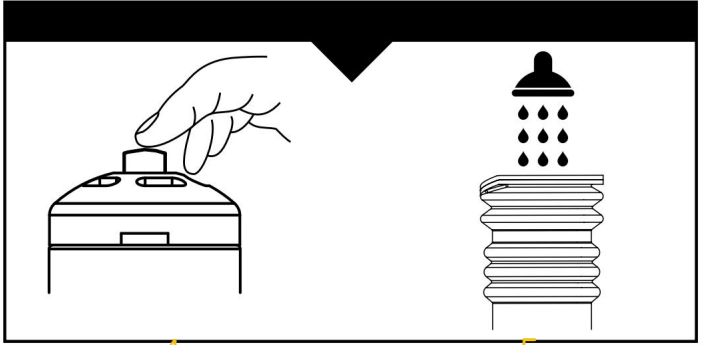


4


5

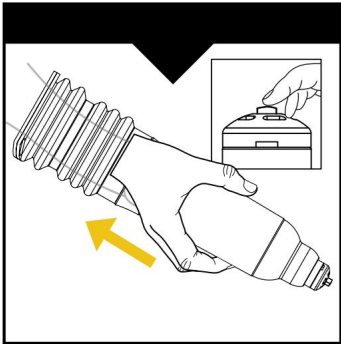


613

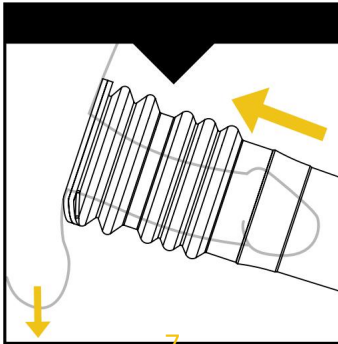




7

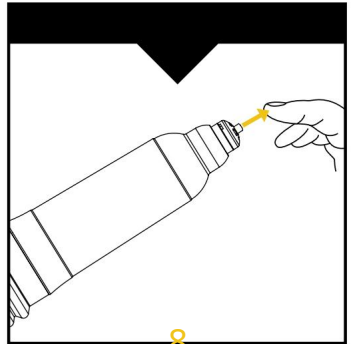

8

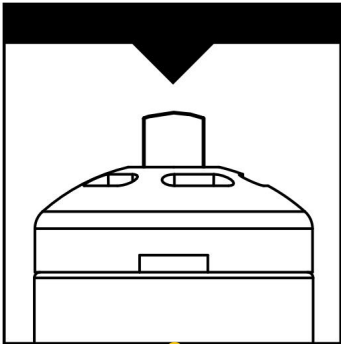

9

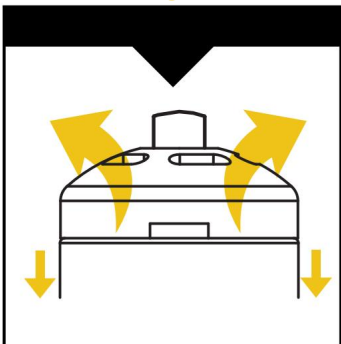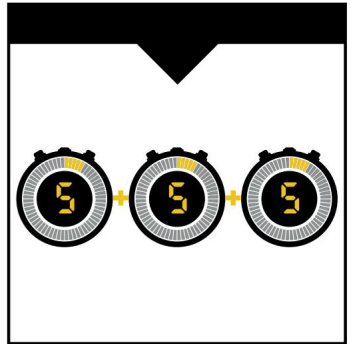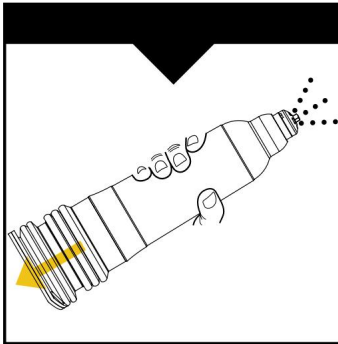

# Machine Translated by Google

Bathmate Hydropump je externí zařízení pro zpevnění penisu, které využívá vakuovou technologii k vytvoření dostatečné tuhosti penisu potřebné pro pohlavní styk. Pečlivě si prosím přečtěte následující pokyny.

## PŘED ZAČÁTKÁNÍM

Důležité bezpečnostní varování

- Poradte se se svým lékařem před použitím tohoto zařízení, pokud máte některý z následujících příznaků: příznaky erektilní dysfunkce, cukrovky, roztroušené sklerózy, cirhózy jater, chronického selhání ledvin, alkoholismu, zvýšené srdeční nebo dýchací frekvence, srdečního nebo plicního onemocnění, vysokého krevního tlaku, mrtvice, epilepsie, poruchy močových cest (např. problémy s ledvinami, močovým měchýřem nebo pohlavními orgány) nebo leukémie.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud:
  - Trpíte srpkovitou anémií.
  - Máte v anamnéze prodlouženou erekci.
  - Trpíte poruchami srážlivosti krve nebo v současné době užíváte léky na ředění krve, jako je aspirin.
- Hydropumpa je určena k použití jedním uživatelem.
- Hydročerpadla Bathmate jsou určena k použití ve vodě, proto se s tímto zařízením nedoporučuje používat žádné mazivo.
- Musíte mít plné ruce ruce s dostatečnou silou k ovládání mechanismu uvolnění podtlaku. Snížená síla v rukou může způsobit bezpečné odstranění tohoto zařízení obtížně.
- Produkt musíte mít neustále pod kontrolou, během používání hydropumpu se vyvarujte usínání.
- Nepoužívejte toto zařízení pod vlivem alkoholu nebo drog, protože by to mohlo zhoršit váš úsudek a zvýšit riziko zranění penisu.
- Toto zařízení nikdy nesmíte používat, pokud máte sníženou citlivost bolesti v oblasti penisu, protože by to mohlo zhoršit vaši schopnost detekovat jakékoli možné zranění způsobené zařízením.
- Použití vakuové pumpy může způsobit modřiny nebo prasknutí cév v penisu nebo šourku, což má za následek petechie, krvácení nebo tvorba hematomu.
- Použití vakuové pumpy může zhoršit již existující onemocnění, jako je Peyronieho choroba, priapismus a striktury močové trubice.
- Nesprávné použití tohoto zařízení může vést k poranění penisu.
- Pokud se objeví silná bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte přípravek používat a poradte se s lékařem.

## ZAČÍNÁME

Doporučené použití

Abyste z hydropumpovací pumpy dosáhli optimálního výkonu a vyhnuli se nesprávnému použití, které může způsobit nepohodlí, důrazně se doporučuje dodržovat níže uvedené pokyny:

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:** Umyjte hydropumpu teplou, čistou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. • Ujistěte se, že máte dostatečně zastržené ohanbí. To usnadní vakuové utěsnění k pánevnímu sedátku. • Je nutná několikaminutová relaxace v teplé sprše nebo vaně, aby varlata změkla a zůstala volná od utěsněné oblasti, čímž se předejde jakémukoli nepohodlí.

- Aplikujte pouze minimální množství podtlaku potřebné k dosažení erekce. Nadměrný podtlak a příliš energické pumpování může vést k modřinám nebo poranění penisu.
- Pro dosažení co největší tvrdosti erekce a optimálního průtoku krve je nejlepší vyjmout zařízení každé 2-3 minuty a nechat penis zatahnout. Masírujte penis v ochablé po dobu 2 minut, poté znovu přiložte zařízení a postup opakujte. Během 15minutové terapie byste to měli udělat maximálně 3krát.
- Nepoužívejte hydročerpadlo déle než 15 minut během 24 hodin.

Jak funguje hydročerpadlo

Hydropumpa funguje tak, že vytváří podtlak v oblasti ohanbí uživatele, který obklopuje ochablý penis. Když je pumpa zatačena dolů k tělu, měch se stlačí a voda je vytlačena z konce pumpy přes otevřený ventil. Po uvolnění se měch roztáhne a ventil se uzavře, čímž se uvnitř pumpy vytvoří částečný podtlak. To způsobí, že se penis roztáhne a naplní krví, a vytvoří se erekce.

Opakované pumpování zvyšuje podtlak, a tím i velikost erekce.

Uživatel ovládá úroveň podtlaku stlačením ventilu dovnitř proti pružině, čímž se ventil otevře a umožní se zpětný proud vzduchu nebo vody do těla čerpadla, čímž se podtlak částečně nebo úplně uvolní.

Podtlak v hydropumpách Bathmate je vytvářen elastickou zpětnou silou měchového manžetového čerpadla, takže uživatel nemůže překročit bezpečné úrovně částečného podtlaku povolené evropskými a americkými lékařskými předpisy.

**DŮLEŽITÉ ČERNÝ**

kohoutek na horní straně ventilu se pohybuje stisknutím a přidržení ventilu v zavřené poloze. Zavřená poloha by se měla používat pouze při plnění hydropumpu vodou ve sprše. Ve všech ostatních případech by měl být černý kohoutek v otevřené poloze. Pokud se nezajistí, aby byl černý kohoutek v otevřené poloze, hydropump nebude správně fungovat.

# Machine Translated by Google

Používání hydropumpy ve sprše

Sprchový popruh můžete použít nasunutím konektoru na hydropumpu a uvolnit si tak ruce k mytí.

1. Na pár minut relaxujte ve sprše.
2. Prstem zatlačte na černý uzávěr a podržte ho v zavřené poloze a otáčejte hydropumpou pod sprchovou hlavici, dokud se nenaplní vodou.
3. Držte černý vývod v zavřené poloze a umístěte hydropumpu přes ochablý penis těsně k pánevní oblasti. Zkosení lze umístit směrem nahoru nebo dolů v závislosti na vaší úrovni pohodlí.
4. Přitiskněte se k tělu a ujistěte se, že je poloha pohodlná a že máte volná varlata.
5. S hydročerpádlem mírně nakloněným nahoru otevřete ventil uvolněním černého kohoutku a začněte čerpat.
6. Při pumpování se ujistěte, že je černá tryska ve střední (otevřené) poloze.
7. Pomalu a rovnoměrně pumpujte, dokud měch nezůstane stlačený, což znamená, že bylo dosaženo optimálního podtlaku.
8. Ujistěte se, že dodržujete doporučené pokyny.
9. Chcete-li hydročerpadlo vyjmout, uvolněte podtlak stisknutím víčka ventilu směrem dovnitř, čímž aktivujete rychloupínací mechanismus, a posuňte Hydropumpa z penisu.

Používání hydropumpy ve vaně

1. Na pár minut relaxujte ve vaně.
2. Naplňte hydropumpu lázeňskou vodou.
3. Umístěte hydropumpu přes ochablý penis těsně k pánevnímu sedáku s černým výstupkem v otevřené poloze. Zkosení lze umístit směřující nahoru nebo dolů v závislosti na vaší úrovni pohodlí.
4. Přitiskněte se k tělu a ujistěte se, že je poloha pohodlná a že máte volná varlata.
5. S hydropumpou mírně nakloněnou nahoru se ujistěte, že je černá trubka v otevřené poloze, a začněte pumpovat.
6. Při pumpování se ujistěte, že je černá tryska ve střední otevřené poloze.
7. Pomalu a rovnoměrně pumpujte, dokud měch nezůstane stlačený, což znamená, že bylo dosaženo optimálního podtlaku.
8. Ujistěte se, že dodržujete doporučené pokyny.
9. Chcete-li hydročerpadlo vyjmout, uvolněte podtlak stisknutím víčka ventilu směrem dovnitř, čímž aktivujete rychloupínací mechanismus, a posuňte Hydropumpa z penisu.

Čištění a údržba

Hydropumpu omyjte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Nechte hydropumpu uschnout a skladujte ji na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Zákaznický servis a záruka

Hydropumpa Bathmate je navržena pro mnoho let bezproblémového používání. Vztahuje se na ni dvouletá záruka na vadné díly nebo špatné zpracování. Zákaznický servis a veškeré podrobnosti o záruce naleznete na adrese: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

V nepravděpodobném případě uplatnění záruční reklamace si společnost DX Products Ltd vyhrazuje právo požadovat vrácení hydročerpádlu nebo předložení dokladu o poškození.

Identifikační kód produktu (PID)

Společnost DX Products Ltd používá pro všechny produkty identifikační kód. Hydročerpádlu Bathmate nesou jedinečný épísmenný PID kód, který najdete na štítku vašeho hydročerpádlu.

Tento kód je vaší zárukou pravosti a důkazem, že kupujete originální produkt, nikoli nekvalitní padělek. Použijte prosím svůj PID k ověření produktu a zaregistrujte si záruku online na našich webových stránkách: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

La Bathmate Hydropump est un dispositif externe pour la rigidité pénienne qui use la technologie du vide afin de créer la rigidité pénienne suffisante requise pour une relationship sexuelle. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

## PŘED ZAČÁTEK

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif si vous souffrez de l'une des maladies suivantes : Symptômes de défaillance érectile, diabète, sclérose en plaques, cirrhose du foie, insuffisance rénale chronique, alphas alcool respirační onemocnění, kardiální nebo plicní nemoc, arteriální hypertenze, mozková nehoda, épilepsie, potíže s močením (par exemple problèmes rénaux, à la vessie ou génitaux) nebo leucémie.
- N'utilisez pas ce dispositif dans les cas suivants :
  - Vous souffrez de drépanocytose.
  - Vous avez des antécédents d'érections prolongées.
  - Vous souffrez de troubles de saignement ou prenez actuellement un traitement anticoagulant, typiquement l'aspirine.
- L'Hydropump est destinée à être utilisée par un utilisateur unique.
- Les Bathmate Hydropumps jsou určeny pro použití ve vodě. De ce fait, nous déconseillons tout lubrifiant avec ce dispositif.
- Vous devez pouvoir utiliser vos mains avec force afin d'actionner le mécanisme d'évacuation de l'air. Une force insuffisante dans les mains peut rendre le retrait en toute sécurité de ce dispositif difficile.
- Vous devez garder le contrôle sur le produit à tout moment and éviter de vous endormir pendant l'utilisation de l'Hydropump.
- Évitez d'utiliser ce dispositif sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Votre jugement pourrait être affecté et augmenter le risque de blesser votre pénis.
- N'utilisez jamais ce dispositif v případě snížení citlivosti hlasování à la douleur dans la zone du pénis. Vous risqueriez d'être dans l'incapacité de détecter une quelconque blessure occasionnée par le dispositif.
- L'usage d'une pompe à vide peut provoquer des ecchymoses ou une rupture des vaisseaux sanguins du pénis ou du scrotum, entraînant une hémorragie, hémorragie ou création d'hématome.
- Použití d'une pompe à vide peut aggraver des maladies préexistantes ainsi que la maladie de La Peyronie, le priapisme et les sténoses urétrales.
- Nevhodné použití je od dispositif pourrait blesser le pénis.
- En cas de douleur sévère ou d'inconfort, cessez l'usage immédiatement et consultez votre médecin.

## HLAVNÍ CENA

### Doporučené použití

Afin que l'efficacité de l'Hydropump soit optimale et d'éviter une utilisation inappropriée pouvant provoquer un jistý gen, nous vous recommandons fortement de suivre les guidelines qui suivent :

### AVANT LE PREMIER POUZITÍ Lavez votre Hydropump à l'eau tiède, propre à savonneuse and rincez soigneusement.

- Réduisez suffisamment votre pilosité pubienne. Vous faciliterez ainsi le joint hermétique contre le bassin.
- Une période de relaxation de quelques minutes dans une douche ou un bain chaud garantit une jistě détente testiculaire afin que les varlata restent à l'extérieur de la zone d'aspiration, évitant ainsi tout inconfort.
- Jedinečná aplikace s minimální depresí aspirace, která je nezbytná pro dosažení požadované erekce. Une pression d'aspiration inadéquate et un pompage trop vigoureux peuvent entraîner des ecchymoses ou des blessures pour votre pénis.
- Pour bénéficier au mieux d'une érection ferme et d'un flux sanguin optimal, nejvýhodněji d'enlever le dispositif toutes 2 à 3 minutes naližte permettre au pénis de se rétracter. Massez le pénis au repos pendant 2 minutes Puising Appliques à nouveau le dispositif and répétez ce processus.
- Proces řazení maximálně à 3 reprízy po dobu 15 minut.
- N'utilisez pas l'Hydropump pendant plus de 15 minutes au cours d'une période de 24 heures.

### Komentář fonctionne l'Hydropump

L'Hydropump fonctionne en créant un vide contre le pubis de l'utilisateur et enfermant le pénis au repos. Lorsque la pompe est poussée vers le bas contre le corps, le soufflet est comprimé et l'eau est expulsée de l'extrémité de la pompe par la valve ouverte. Libéré, le soufflet s'étend et la valve se ferme, créant un vide partiel dans la pompe. Ceci ou tom ve chvále à při opakování zpíval du pénis à crée une érection. Le pompage répété augmente le vide et donc également la taille de l'érection.

L'utilisateur contrôle le niveau de vide en appuyant sur la valve contre le ressort. La valve s'ouvre ainsi tout en permettant à l'air ou à l'eau de rentrer à nouveau dans le corps de la pompe. Le vide est ainsi partiellement ou complètement interrompu.

Podívejte se na hydropumpy Bathmate Hydropumps se skládají z elastického suflitu. L'utilisateur ne peut donc pas dépasser les niveaux de vide partiel de sécurité autorisés par la législation dans le domaine médical en Europe et aux États-Unis.

## DŮLEŽITÉ

Le bouton noir sur le dessus de la valve est actionné en appuyant sur la valve fermée sans la relâcher. Cette position devrait être utilisée unique pendant le replissage de l'Hydropump avec de l'eau sous la douche. Dans tous les autres cas, le bouton noir doit se trouver en position ouverte. L'Hydropump ne fonctionne pas correction si vous ne vous surez pas que le bouton noir se trouve en position ouverte.

## Machine Translated by Google

Použití hlasování Hydropump sous la douche

Vous pouvez utiliser la bande d'attache spéciale douche en y glissant l'embout sur l'Hydropump pour garder ainsi les mains libres.

1. Relaxez-vous sous la douche pendant quelques minut.
2. Appuyez avec votre doigt sur le bouton noir sans le relâcher pour le mettre en position fermée, retournez ensuite l'Hydropump sous la pomme de douche jusqu'à ce qu'elle soit remplie d'eau.
3. Placez l'Hydropump sur votre penis au repos bien contre votre bassin tout en maintenant le bouton noir en position fermée Le bord de la gaine peut être positionné en direction du haut ou du bas, selon votre niveau de confort.
4. Créez l'étanchéité avec votre corps en vous assurant que la position est confortable et que les testicules sont libres.
5. Naklonění hydraulického čerpadla k hornímu okraji, otevření ventilu a přechodu k černému knoflíku a spuštění čerpadla.
6. Lorsque vous pompez, surez-vous que le bouton noir est bien en position centrale (ouverte).
7. Pompez lentement et régulièrement jusqu'à ce que le soufflet reste abaissé. C'est l'indication que le niveau de vide optimal est atteint.
8. Assurez-vous de respecter les recommandées instructions.
9. Pour d'urgence de l'Hydropump, pressez le bouchon de valve vers l'intérieur afin d'interrompre l'aspiration en activant le mécanisme de libération rapide et terminez en glissant l'Hydropump pour dégager votre penis.

Použití hlasování Hydropump v baignoire

1. Détendez-vous dans la baignoire pendant quelques minut.

2. Remplissez l'Hydropump d'eau du bain.

3. Placez l'Hydropump sur votre penis au repos bien contre votre bassin avec le bouton noir en position ouverte. Le bord de la gaine peut être positionné dirigé vers le haut ou le bas, selon votre niveau de confort.

4. Créez l'étanchéité avec votre corps en vous assurant que la position est confortable et que les testicules sont libres.

5. Avec l'Hydropump légèrement inclinée vers le haut, surez-vous que le bouton noir est en position ouverte and commencez à pomper.

6. Lorsque vous pompez, surez-vous que le bouton noir est bien en position ouverte.

7. Pompez lentement et régulièrement jusqu'à ce que le soufflet reste abaissé. C'est l'indication que le niveau de vide optimal est atteint.

8. Assurez-vous de respecter les recommandées instructions.

9. Pour d'urgence de l'Hydropump, pressez le bouchon de valve vers l'intérieur afin d'interrompre l'aspiration en activant le mécanisme de libération rapide et terminez en glissant l'Hydropump pour dégager votre penis.

Úklid a úklid

Lavez votre Hydropump à l'eau tiède savonneuse and rincez-la soigneusement. Laissez sécher votre Hydropump and ranger dans un endroit sec, à l'abri de la lumière direct du soleil.

Asistence klientovi a záruka

La Bathmate Hydropump je vyrobena z manière à fonctionner přívěsek s jmenovitými années bez problémů. Elle bénéficie d'une garantie deux ans pièces et main d'œuvre. Klient L'assistance a podrobné informace o záruce, kterou máte k dispozici:

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

Dans l'éventualité d'une réclamation de garantie, DX Products Ltd má rezervovaný zdroj pro vrácení dodavatele l'Hydropump nebo de fournir la preuve du dommage.

Code d'identification de produit (PID - Identifikační kód produktu)

DX Products Ltd zaměštnává identifikační kód pro všechny produkty. Popis produktu Les Bathmate Hydropumps s jedinečným kódem PID s 6 písmeny pro označení hydropumpy. Ce code garantit l'authenticité du produit et constitue la preuve que vous avez acheté un produit authentique and non un article contrefait de qualité inférieure. Veuillez utilisateur hlasuje o PID pro autentifikátor hlasuje o produktu a přihlašuje hlasovat o garanci na webu :

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

Die Bathmate Hydropumpe ist eine externe Vorrichtung, die mithilfe von Vakuumtechnik für eine für Geschlechtsverkehr ausreichende Penissteifheit sorgt. Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte sorgfältig durch.

## PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

### Důležitá bezpečnostní upozornění

- Konsultieren Sie vor der Nutzung dieser Vorrichtung Ihren Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft: Symptome einer erektilen Dysfunktion, cukrovka, roztroušená skleróza, leberzirhóza, chronische Niereninsuffizienz, Alkoholismus, erhöhte Herz- oder Atemfrequenz, Herz- oder Lungenerkrankung, hoher Blutdruck, Schlaganfall, Epilepsie, Erkrankung der Harnren-rankunge, odzB Nieder-Temfrequenz Leukámie.
- Diese Vorrichtung nicht verwenden, wenn:
  - Sie an einer Sichelzellenanámie leiden.
  - Sie bereits einmal eine länger anhaltende Erektion hatten.
  - Sie an einer Blutungsstörung leiden oder derzeit blutverdünnende Medikamente wie Aspirin zu sich nehmen.
- Die Hydropumpe ist für die Verwendung durch einen einzelnen Benutzer bestimmt.
- Die Bathmate Hydropumpe ist für den Gebrauch in Wasser bestimmt, deshalb wird die Verwendung von Gleitmittel zusammen mit dieser Vorrichtung nie doporučovát.
- Für die Bedienung dieser Vorrichtung benötigen Sie beide Hände, mit der ausreichenden Kraft, den Vakuumfreisetzungsmechanismus zu betätigen. Verringerte Kraft in den Händen kann die sichere Entfernung von dieser Vorrichtung erschweren.
- Sie müssen stets die Kontrolle über die Vorrichtung haben und vermeiden, während des Gebrauchs der Hydropumpe einzuschlafen.
- Verwenden Sie diese Vorrichtung nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, da dies Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen und das Risiko von Verletzungen an Ihrem Penis erhöhen könnte.
- Sie dürfen diese Vorrichtung nicht verwenden, wenn Sie ein verringertes Schmerzempfinden im Penisbereich haben, da dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, mögliche Verletzungen durch die Vorrichtung zu erkennen.
- Der Gebrauch einer Vakuumpumpe kann zu Verletzungen nebo Rissen der Blutgefáße im Penis nebo im Hodensack führen, woraus Petechien, Blutungen nebo Hématombildungen resultieren können.
- Der Gebrauch einer Vakuumpumpe kann bestehende Erkrankungen wie die Peyronie-Krankheit, Priapismus oder Harnröhrenstrikturen zesílit.
- Die falsche Verwendung dieser Vorrichtung kann zu Verletzungen des Penis führen.
- Bei starken Schmerzen oder Unbehagen ist der weitere Gebrauch umgehend einzustellen und ein Arzt aufzusuchen.

## INBETRIEBNAHME

### Doporučené použití

Pro optimální Nutzen der Hydropumpe a pro všechny bez sachgemaessen Gebrauch, der Unannehmlichkeiten verursachen könnte, zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die nachstehenden Anweisungen zu befolgen:

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: Waschen Sie Ihre Hydropumpe mit warmem, sauberem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich ab. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Schambereich ausreichend gestutzt ist. Dies erleichtert die Vakuumversiegelung gegen das Becken. • Damit die Hoden erweichen, ist eine Entspannungsphase von wenigen Minuten unter einer warmen Dusche oder einem warmen Bad erforderlich. Dadurch werden sie vom Dichtungsbereich nicht betroffen und es kommt zu keinem Unbehagen.

- Nur einen minimalen Unterdruck ausüben, um eine Erektion zu erhalten. Übermäßiger Unterdruck und zu kräftiges Pumpen können zu Ergussbildungen nebo Verletzungen am Penis führen.
- Um am meisten von einer harten Erektion und einer optimalen Durchblutung zu profitieren, ist es am besten, die Vorrichtung alle 2-3 Minuten zu entfernen, damit sich der Penis wieder entspannen kann. Massieren Sie den Penis im schlaffen Zustand für 2 Minuten, dann carryen Sie die Vorrichtung wieder an und wiederholen den Vorgang. Dies sollten Sie maximum 3 Mal in einer 15-minütigen Anwendung machen.
- Verwenden Sie die Hydropumpe nict für mehr als 15 Minuten in einem Zeitraum von 24 Stunden.

### Má funkční hydropumpu

Die Hydropumpe erzeugt im Schambereich des Anwenders ein Vakuum, indem sie den schlaffen Penis umschließt. Wenn die Pumpe nach unten gegen den Körper gedrückt wird, werden die Bälge zusammengepresst und Wasser wird aus dem Ende der Pumpe über das offene Ventil ausgestoßen. Beim Loslassen dehnen sich die Bälge wieder aus und das Ventil schließt sich, wodurch innerhalb der Pumpe Unterdruck erzeugt wird. Dadurch dehnt sich der Penis aus und wird mit Blut gefüllt, es kommt zu einer Erektion. Erneutes Pumpen erhöht den Unterdruck, wodurch die Größe der Erektion erhöht wird.

Der Anwender steuert den Unterdruck, indem er das Ventil nach innen gegen die Feder drückt. Dadurch öffnet sich das Ventil und lässt Luft nebo Wasser wieder zurück in das Pumpengehäuse, wodurch der Unterdruck teilweise nebo vollständig aufgelöst wird.

In der Bathmate Hydropumpe wird der Unterdruck durch elastische Rückstoßkraft der Faltenbalgpumpe erzeugt, sodass der Anwender die sicheren Unterdruckniveaus gemäß europäischen und US-amerikanischen medizinischen Verordnungen.t

## WICHTIG

Der schwarze Kern oben auf dem Ventil wird bewegt, indem das Ventil gedrückt und geschlossen gehalten wird. Die geschlossene Position sollte nur beim Befüllen der Hydropumpe mit Wasser unter der Dusche verwendet werden. Ansonsten sollte der schwarze Kern in der geöffneten Position sein. Wenn der schwarze Kern nicht in der geöffneten Position ist, funktioniert die Hydropumpe gegebenenfalls nicht ordnungsgemäß.

## Machine Translated by Google

Verwendung Ihrer Hydropumpe pod Dusche

Sie können das Duschband verwenden, indem sie den Anschluss auf die Hydropumpe schieben, damit Ihre Hände für das Waschen frei sind.

1. Entspannen Sie sich für wenige Minuten unter der Dusche.
2. Drücken und halten Sie den schwarzen Kern mit Ihrem Finger in geschlossener Position und drehen Sie die Hydropumpe unter dem Duschkopf um, bis diese voll Wasser ist.
3. Während Sie den schwarzen Kern in geschlossener Position halten, platzieren Sie die Hydropumpe über ihrem schlaffen Penis und richten Sie sie fest gegen Ihr Becken. Die Fase kann entweder nach oben oder nach unten gerichtet sein, je nach Ihrem Komfortniveau.
4. Dichten Sie die Pumpe gegen Ihren Körper ab und stellen Sie dabei sicher, dass die Platzierung angenehm ist und dass Ihre Hoden im Freien sind.
5. Mit einer leicht nach oben geneigten Hydropumpe das Ventil öffnen, indem Sie den schwarzen Kern lösen und mit dem Pumpen beginnen.
6. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Kern beim Pumpen in der mittleren (geöffneten) Pozeice ist.
7. Langsam und gleichmäßig pumpen, bis die Bälge in gedrückter Position bleiben. Dies weist darauf hin, dass ein optimaler Unterdruck erreicht wurde.
8. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Anweisungen befolgen.
9. Um die Hydropumpe zu entfernen, lösen Sie den Unterdruck durch Eindrücken der Ventilkappe, um den Schnellfreisetzungsmechanismus zu aktivieren und lassen Sie die Hydropumpe von Ihrem Penis herunter gleiten.

Verwendung Ihrer Hydropumpe in der Badewanne

1. Entspannen Sie sich für wenige Minuten in der Badewanne.
2. Füllen Sie die Hydropumpe mit Badewasser.
3. Platzieren Sie die Hydropumpe über Ihrem schlaffen Penis fest bis hin zum Becken. Dabei muss der schwarze Kern in geöffneter Position sein. Die Fase kann entweder nach oben oder nach unten gerichtet sein, je nach Ihrem Komfortniveau.
4. Dichten Sie die Pumpe gegen Ihren Körper ab und stellen Sie dabei sicher, dass die Platzierung angenehm ist und dass Ihre Hoden im Freien sind.
5. Mit einer leicht nach oben geneigten Hydropumpe sicherstellen, dass der schwarze Kern in der geöffneten Position ist und mit dem Pumpen začátek
6. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Kern beim Pumpen in der mittleren geöffneten Pozeice ist.
7. Langsam und gleichmäßig pumpen, bis die Bälge in gedrückter Position bleiben. Dies weist darauf hin, dass ein optimaler Unterdruck erreicht wurde.
8. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Anweisungen befolgen.
9. Um die Hydropumpe zu entfernen, lösen Sie den Unterdruck durch Eindrücken der Ventilkappe, um den Schnellfreisetzungsmechanismus zu aktivieren und lassen Sie die Hydropumpe von Ihrem Penis herunter gleiten.

Čištění a péče

Waschen Sie Ihre Hydropumpe mit warmem Seifenwasser aus und spülen Sie sie gründlich ab. Lassen Sie Ihre Hydropumpe trocknen und bewahren Sie an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Kundenservice & Kundengarantie

Die Bathmate Hydropumpe wurde für einen langjährigen sorgenlosen Gebrauch entworfen. Das Gerät enthält eine zweijährige Garantie auf defekte Teile oder mangelhafte Verarbeitung. Der Kundenservice und Einzelheiten der Garantie können eingesehen werden pod: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

Na podzim eines Garantieanspruchs behält sch DX Products Ltd v právu před, na zadní straně hydropumpe nebo v nachweis eines Schadens zu verlangen.

Identifikační kód produktu (PID)

DX Products Ltd platí pro všechny produkty a identifikační kód. Bathmate Hydropumpen haben einen PID-Code z 6 Buchstaben, der auf dem Etikett der Hydropumpe zu finden ist. Dieser Code dient der Gewährleistung der Echtheit und dem Nachweis, dass Sie ein echtes Produkt und nicht eine minderwertig gefälschte Kopie kaufen. Verwenden Sie bitte Ihren PID-Code, um die Echtheit Ihres Products für bestätigen und Registrieren Sie Ihre Garantie online auf unserer Website: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

La Hidrobomba de Bathmate es un dispositivo externo que facilita la rigidez del pene. Utiliza tecnología de vacío para crear una rigidez suficiente del pene que permita el coito. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.

## PŘED POČÍTÁNÍM

Instrucciones de seguridad importantes

- Poradte se a su medico antes de utilizar je dispositivo a padece alguno de los siguientes síntomas: Síntomas de disfunción eréctil, diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis de hígado, insuficiencia ledvin crónica, alkoholismus, ochrnutí kardiovaskulárního systému enfermedad pulmonar, presión arteriální elevada, enfermedad vaskulární cerebrální, epilepsie, trastorno urinario (por ejemplo, problemas de riñón, vejiga o genitales) nebo leukémie.
- Žádné využít je dispositivo si:
  - falciformní anémie padece;
  - tiene un historial de erecciones prolongadas;
  - padece alteraciones hemorrágicas o currentmente toma alguna medicación para reducción de la hemorragia como aspirina.
- La Hidrobomba está diseñada para su uso personal e nepřenosná.
- Las Hidrobombas de Bathmate están diseñadas para ser utilizadas en el agua, por lo que no se recomienda el uso de ningún tipo de lubricante s tímto zařízením.
- Debe tener ambas manos libres para hacer funcionar el mecanismo de liberación del vacío. La falta de fuerza en las manos podría dificultar la retirada segura de este dispositivo.
- Debe mantener el control del producto and todo momento. Evite quedarse dormido mientras utiliza la Hidrobomba.
- No utilice este dispositivo mientras se encuentre bajo los efectos de alkohol nebo drogy, ya que podría alterar su capacidad de juicio y aumentar el riesgo de lesiones.
- No utilice nunca ispositivo si tiene una sensación de dolor cada vez menor en la zona del pene, su capacidad para detectar cualquier lesión potencial provocada por el dispositivo podría disminuir.
- La utilización de una bomba de vacío podría contusionar o romper los vasos sanguíneos del pene o el escroto, provocando petequias, hemorragie o la formación de un hematom.
- La utilización de una bomba de vacío podría agravar los padecimientos existentes, tales como la enfermedad de Peyronie, el priapismo o la estrechez uretrální.
- El mal uso de este dispositivo podría causar una lesión en el pene.
- Si siente dolor agudo o malestar, děje de utilizar el dispositivo de inmediato y consulte a su medico.

## PRVNÍ KROKY

Doporučené použití

Con el fin de obtener el maximo beneficio de la Hidrobomba y evitar unuso inadecuado que pueda provocar malestar, le recomendamos encarecidamente que siga las instrucciones description a continuación:

- ANTES DEL PRIMER USO: Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, luego aclárela abundantemente. • Asegúrese de que la zona púbica esté bien afeitada. Esto facilitará el sello de vacío contra la base pélvica. • Es necesario un periodo de relajación de unos minutos en una ducha o baño calientes para que los testículos se ablanden, lo que permite mantenerlos apartados de la zona de sellado y evitar cualquier molestia.
- Aplique solo la cantidad mínima de presión de vacío necesaria para lograr la erección. Una presión de vacío excesiva y un bombeo demasiado fuerte podrían causar contusiones o lesionar el pene.
- Para lograr los mejores resultados en la rigidez de la erección y un flujo sanguíneo óptimo, lo mejor es retirar el dispositivo cada 2-3 minutos y dejar que el pene se retraiga. Masajee el pene flácido durante 2 minutos, a continuación, vuelva a aplicar el dispositivo y repita el proceso. Debe hacerlo como maximálně 3 před sezením 15 minut.
- Žádná utilize la Hidrobomba má 15 minut cada 24 horas.

Jak funguje hydrobomba

La Hidrobomba funciona creando un sello de vacío en la zona púbica del usuario que rodea al pene flácido. Cuando la bomba se presiona hacia abajo contra el cuerpo, los fuelles se comprimen y el agua es expulsada desde el extremo de la bomba a través de la válvula abierta. Al soltarse, los fuelles se expanden y la válvula se cierra, creándose un vacío parcial dentro de la bomba. Esto hace que el pene se expanda y se llene de sangre, lo que provoca una erección. Al bombear de nuevo, el vacío aumenta al igual el tamaño de la erección.

El usuario controla el nivel de vacío presionando la válvula hacia dentro contra el muelle, abriendo la válvula y permitiendo que el aire o el agua vuelvan a entrar en el cuerpo de la bomba, de forma que el vacío se libere de formace par.

El vacío de las Hidrobombas Bathmate se vytvořil z fuerza de retroceso elastica de la bomba de fuelles, de form que el usuario no puede superar los niveles de vacío parcio seguro permitidos por las normativas médicas de Europa y EE. UU.

## DŮLEŽITÉ

La punta negra de la parte superior de la válvula se mueve presionando y manteniendo la válvula cerrada. La posición cerrada solo debe usarse cuando se llena la Hidrobomba de agua en la ducha. El resto del tiempo, la punta negra debe estar en posición abierta. Si la punta negra no está en posición abierta, la Hidrobomba no funcionará correctamente.

## Machine Translated by Google

Uso de la Hidrobomba en la ducha

Si lo desea, puede utilizar la correa de la ducha para tener las manos libres. Para ello, deslice el conector en la Hidrobomba.

1. Relájese unos minutos en la ducha.
2. Presione la punta negra hasta la posición cerrada y manténgala presionada con el dedo mientras vuelca la Hidrobomba bajo la ducha para que se llene con agua.
3. Sin dejar de mantener la punta negra en la posición cerrada, colóquese la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica. El fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
4. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
5. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, abra la válvula soltando la punta negra y empiece a bombear.
6. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
7. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se queden comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
8. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
9. Para quitar la Hidrobomba, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula, para activar el mecanismo de liberación rápida, y deslice la Hidrobomba para extraerla.

Uso de la Hidrobomba en la bañera

1. Relájese unos minutos en la bañera.
2. Llene la Hidrobomba con agua.
3. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición abierta. El paliva puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
4. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
5. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, asegúrese de que la punta negra se encuentra en posición abierta y se está vaciando.
6. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central abierta.
7. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se queden comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
8. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
9. Para quitarse la Hidrobomba, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula, para activar el mecanismo de liberación rápida, y deslice la Hidrobomba para extraerla.

### Čištění a údržba

Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, a continuación aclárela abundantemente. Déjela secar y guárdela en un lugar seco alejado de la luz solar.

### Garantía y Atención al cliente

La Hidrobomba Bathmate está diseñada para ser utilizada durante muchos años. Está cubierta por 1 año de garantía en caso de piezas defectuosas o de fallos en la fabricación. Pro konzultanta s podobnostmi o garanci a kontaktech pro klienty, navštivte: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

V případě nepravděpodobného vrácení záruky má společnost DX Products Ltd.

### Identifikační kód produktu (PID)

DX Products Ltd používá identifikační kód pro všechny produkty. Todas las Hidrobombas Bathmate llevan un código PID único de 6 let que encontrará en la etiqueta de su hidrobomba. Dicho código es la garantía de autenticidad. Le demuestra que está comprando un producto genuino, y no una copia falsa de peor calidad. Používání PID pro ověřování produktů a registrátora na lincea la garantía na nové stránce webu: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

Bathmate Hydropump je dispozitivní esterno pro touhu penisu, která je řízena technickou del vuoto pro vytvoření a tuhost penisu durante rapporti sessuali. Leggere attentamente le istruzioni seguenti.

## PRVNÍ POČÁTEK

Důležité upozornění na bezpečnost

- Consultare il proprio medico prima di usare il dispositivo, in uno dei seguenti casi: sintomi di disfunzione erettile, diabetes, sclerosi multipla, cirrosi epatica, insufficienza renale cronica, alcolismo, frequenza cardiaca anormale respiratoria a cardioapatia alta, ictus, epilessia, disturbi alle vie urinarie (per es. problemi a reni, vescica o genitali) nebo leukemie.

• Nepoužívá se:

- si soffre di anemia falciforme;
- se in passato si sono avute erezioni prolungate;
- se si soffre di un qualunque disturbo della coagulazione oppure se si assumono anticoagulanti come l'aspirina.

• L'Hydropump è destinata all'uso da parte di un solo utente.

• Le Bathmate Hydropump sono pensate per l'uso in acqua, quindi non è necessario usare alcun lubrificante con questo dispositivo.

• È necessario l'uso pieno delle proprie mani, con la forza di azionare il meccanismo di rilascio del vuoto. Una ridotta forza nelle mani potrebbe rendere difficile la rimozione sicura di questo dispositivo.

• Nutné ovládní a disponibilní v různých okamžicích, kdy je nutné použít hydročerpadlo.

• Non use il dispositivo mentre si è sotto l'influsso di alcol o droghe, poiché ciò potrebbe causare errori di valutazione e aumentare il rischio di

ferimento al pene (inadatti ferimento al pene).

• Non usare mai il dispositivo se si ha una ridotta sensibilità al dolore nell'area del pene, poiché ciò potrebbe compromettere la capacità di valutazione nel rilevare qualunque potenziale ferimento causato dal dispositivo.

• L'uso di una pompa a vuoto può danneggiare o rompere i vasi sanguigni all'interno del pene e dello scroto, causando petecchia, emorragia o tvorba ematomů.

• L'uso della pompa a vuoto può aggravare le condizioni preesistenti come la malattia di La Peyronie, priapismo nebo restringimenti uretrali.

• L'uso scorretto del dispositivo può causare danni al pene.

• Qualora si presentino dolore forte or fastidio, smettere immediatamente l'uso e consultare un dottore.

## POČÁTEK POUŽITÍ

Doporučené použití

Al fine di ottenere benefici ottimali dall'Hydropump ed evitare l'uso unappropo che potrebbe causare fastidio, Sugeriamo fortemente di seguire le istruzioni elencate di seguito:

PRIMA DEL PRIMO USO: lavare l'Hydropump se používá acqua calda e saponata, e sciacquare a fondo. • Accertarsi che l'area del pube sia ben rasata. Questo faciliterà l'aderenza creata dal vuoto con il pelvi. • Sono necessari alcuni minuti di rilassamento, facendo una doccia o un bagno caldo, pensare ai testicoli di ammorbidirsi, thanksendo loro di restare comunque liberi dell'area di aderenza evitando così qualunque fastidio.

• Aplikujte solamente la quantità minima di pressione a vuoto nutné a raggiungere l'erezione. Una pressione a vuoto eccessiva oppure il pompaggio vigoroso possono danneggiare o ferire il pene.

• Za beneficiare al massimo della durezza dell'erezione e di un flusso sanguigno ottimale, è meglio rimuovere il dispositivo ogni 2-3 minuti a souhlas al pene di ritirarsi. Massaggiare il pene alla stato flaccido ogni 2 minuty, quindi applicare nuovamente il dispositivo e ripetere il processo. Operace přiběhu v masovém efektu 3 volte ogni session po 15 minutách.

• Nepoužívá se hydročerpadlo za 15 minut v periodě 24 rudy.

Jak funguje hydročerpadlo

Hydropump funguje jako creando un'aderenza a vuoto control l'area pubica dell'utilizzatore, racchiudendo il pene in stato flaccido. Quando la pompa viene spinta verso il basso control il corpo, il soffietto si comprime e l'acqua viene iniettata dalla fine della pompa tramite la valvola di apertura.

Quando rilasciato, il soffietto si espande e la valvola si chiude, creando un vuoto parziale all'interno della pompa. Questo accetta al pene di ingrandirsi e di riempirsi di sangue, creando un'erezione. Il ripompaggio aumenta il vuoto, aumentando quindi anche la dimensions dell'erezione.

L'utente controlla il livello di vuoto premendo la valvola verso l'interno control la molla, aprendo la valvola e agreement all'aria o all'acqua di tornare nel corpo della pompa, quindi rilasciando parzialmente o completamente.

Il vuoto all'interno della Bathmate Hydropump viene creato dalla forza elastica di ritorno della pompa with soffietto, like l'utente non può superare and livelily iscuri di vuoto parziale agreement ile the norme mediche europee e USA.

## DŮLEŽITĚ

Il nottolino nero in cima alla valvola si muove premendo e tenendo la valvola chiusa. La posizione chiusa dovrebbe essere usata esclusivamente durante il riempimento della Hydropump con l'acqua in doccia. V tutti gli altri casi, il nottolino nero deve trovarsi in posizione aperta. Se il nottolino nero non si trova in position aperta, l'Hydropump non funzionerà correttamente.

## Machine Translated by Google

### Použití hydročerpádky v doku

È possibile usare la tracolla da doccia facendo scorrere il connettore all'interno dell'Hydropump, lasciando così libere le mani per il lavaggio.

1. Rilassarsi in doccia per alcuni minuti.
2. Premere e tenere premuto il nottolino nero in chiusa con le dita e capovolgere l'Hydropump sotto il soffione della doccia finché sarà vodní piena.
3. Tenendo il nottolino in posizione chiusa, posizionare l'Hydropump sul pene in stato flaccido, in modo che aderisca bene al pene. La smussatura può essere posizionata in modo che sia rivolta verso l'alto o il basso, a seconda del livello di comfort.
4. Creare aderenza con il corpo, garantendo che il posizionamento sia confortevole e che i testicoli siano ben liberi.
5. Con l'Hydropump in posizione angolare a leggermente rivolta verso l'alto, aprire la valvola rilasciando il nottolino nero e iniziare a pompare.
6. Accertarsi che il nottolino nero sia in posizione centrale (aperta) durante il pompaggio.
7. Pompare lentamente e finché il soffiello rimane abbassato, poiché ciò indica che si è ottenuto il vuoto ottimale.
8. Accertarsi di rispettare le istruzioni fornite.
9. Per rimuovere l'Hydropump, rilasciare il vuoto abbassando il tappo della valvola verso l'interno, per attivare il meccanismo di rilascio rapido e sfilare via l'Hydropump dal pene.

### Použití hydročerpádky ve vodě

1. Rilassarsi in vasca per alcuni minuti.
2. Riempire l'Hydropump con l'acqua della vasca.
3. Posizionare l'Hydropump sul pene in stato flaccido in modo che aderisca bene al pene, con il nottolino nero in posizione aperta. La smussatura può essere posizionata in modo che sia rivolta verso l'alto o il basso, a seconda del livello di comfort.
4. Creare aderenza con il corpo, garantendo che il posizionamento sia confortevole e che i testicoli siano ben liberi.
5. Con l'Hydropump in posizione angolare a leggermente rivolta verso l'alto, accertarsi che il nottolino nero sia in posizione aperta e iniziare a pompa.
6. Accertarsi che il nottolino nero sia in posizione centrale aperta durante il pompaggio.
7. Pompare lentamente e finché il soffiello rimane abbassato, poiché ciò indica che si è ottenuto il vuoto ottimale.
8. Accertarsi di rispettare le istruzioni fornite.
9. Per rimuovere l'Hydropump, rilasciare il vuoto abbassando il tappo della valvola verso l'interno, per attivare il meccanismo di rilascio rapido e sfilare via l'Hydropump dal pene.

### Pulizie a údržba

Lavare l'Hydropump con acqua calda saponata e risciacquare a fondo. Lasciar asciugare l'Hydropump e conservare in un posto asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

### Zákaznická asistence a záruka

Bathmate Hydropump è progettata per funzionare plico senza alcun problém. È coperta da due anni di garanzia contro parti difettose o scarsa manifattura. Pro klienty a podrobné informace o garanzí, konzultujte na adrese [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support).

Společnost DX Products Ltd, která se chystá zrušit, má za sebou všechny záruky, a společnost DX Products Ltd se řídí bohatými produkty pro restituci hydropumpy, které jsou uvedeny v důkazech.

### Codice Identificativo Prodotto (CIP)

DX Products Ltd usa používá identifikační kód pro tyto produkty a produkty. Le Bathmate Hydropump se vztahuje na kodex CIP unico se 6 písmeny, které jsou k dispozici. Tale codice è garanzia di autenticità e la prova che si sta acquistando un prodotto originale e non una copia di qualità inferiore e contraffatta. Chcete-li použít kód CIP pro autenticitu, vlastní produkt a registraci online záruky na webu: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

A Hidrobomba Bathmate é um dispositivo de rigidez peniana externo que utiliza tecnologia de vácuo para criar rigidez peniana suficiente nutre para o to sexual. Prosím, leia atentamente jako seguintes instruções.

## PŘED PŘEDEM

Avisos de segurança importantes

- Poradte se o seu medico antes de utilizar isoposivo caso apresente qualquer um dos seguintes: Sintomas de disfunção erétil, diabetes, esclerosis múltipla, cirrose hepática, insuficiência renalní crónica, alcoolcaiauésmo, alcoolcaiauésmo, respirační, srdeční nebo plícní, hypertenzní tepna, AVC, epilepsie, distúrbios urinários (příklad, problémy s renais, bexiga nebo genitais) nebo leukémie.
- Não využijte este aparelho se:
  - Sofrer de anemia falciforme.
  - Apresentar um historial de ereções prolongadas.
  - Léčivá antikoagulační léčba jako aspirina.
- A Hidrobomba destina-se a ser utilizada por um único utilizador.
- As Hidrobombas Bathmate destinam-se a ser utilizadas dentro de água, como tal, o uso de qualquer lubrificante com este dispositivo não é poradi(a)
- Deve poder usar fazer pleno uso das mãos, com força para utilizar o mecanismo de alívio de vácuo. Se tiver pouca força nas mãos, a remoção segura deste dispositivo pode tornar-se difícil.

- Nezbytnost produktu trvalého ovládní, aby byl adormecer enquanto utiliza a Hidrobomba.
- Não use este dispositivo enquanto estiver sob a influência de álcool ou de medicamentos, pois tal pode prejudicar o seu discernimento e aumentar o risco de lesão no seu penis.
- Nunca deve utilizar je dispositivo se apresentar sensibilidade diminuída à dor na área do penis, pois tal pode prejudicar a sua capacidade de detetar qualquer potenciální lesão causada pelo dispositivo.
- A utilização de uma bomba de vácuo pode causar hematomas ou romper os vasos sanguíneos dentro do penis ou escroto, resultando em petéquias, hemorragia nebo na formação de um hematoma.
- A utilização de uma bomba de vácuo pode agravar patologias preexistentes como doença de Peyronie, priapismo e estenoses uretrais.
- A utilização incorreta deste dispositivo pode provocar lesões no penis.
- Caso ocorra dor aguda ou desconforto, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte o seu medico.

## POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

Doporučené použití

Pro maximální přínosy pro Hidrobomba a pro režim a evitar o nevhodnou osobu, o qual pode causar desconforto, aconselhamo-lo veementemente a seguir as instruções conforme descritas em seguida:

**ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:** Lave a sua hidrobomba com água morna limpa e sabão e enxágue-a muito bem. • Assegure que a sua zona púbica está razoavelmente bem aparada. Isto facilitará a selagem a vácuo contra o assoalho pélvico. • É necessário um período de relaxamento de alguns minutos num duche ou banho quente para permitir o amolecimento dos testículos, permitindo-lhes ficarem livres da área de selagem e evitando assim qualquer desconforto.

- Aplique apenas a quantidade mínima de pressão de vácuo necessária para atingir uma ereção. A pressão de vácuo overiva eo bombeamento vigoroso excessivo podem resultar em hematomas ou lesões no penis.
- Para atingir rigidez maximum de ereção e maxim fluxo sanguíneo, o melhor é remover or dispositivo and as 2-3 minutes and deixar for penis retrain. Massage o pénis quando este estiver flácido durante 2 minuty e, em seguida, volte a aplicar o dispositivo e repita o processo. Deve proceder desta form no maximo 3 vés em qualquer session of 15 minutes.
- Não použijte Hidrobomba durante mais de 15 minut em qualquer período de 24 horas.

Jak funguje hydraulická bomba

A Hidrobomba funciona ao criar uma selagem a vácuo contra a área púbica do utilizador, envolvendo o pénis flácido. Quando a bomba é empurrada para baixo contra o corpo, os foles comprimem ea água é ejetada da extremidade da bomba através da válvula aberta. Quando aliviados, os foles expandem ea válvula fecha, criando um vácuo parcial no interior da bomba. Isto causa a expansão do penis e este enche-se de sangue, criando uma ereção. O rebombeamento aumenta o vácuo e aumenta assim o tamanho da ereção.

O utilizador controla o nível de vácuo ao pressionar a válvula para dentro contra a mola, abrindo a válvula e permitindo que o ar ou a água retornem ao corpo da bomba, aliviando assim o vácuo parcial ou totalmente.

O vácuo na Hidrobomba Bathmate é criado pela força de recuo elástica da bomba de foles, de modo a que o utilizador não exceda os níveis de vácuo parcial seguro permitido ao abrigo das normas médicas nord europeias americanas.

## DŮLEŽITÉ

A protuberância preta no topo da válvula é movida pressionando e mantendo a válvula fechada. A posição fechada apenas deve ser utilizada durante o enchimento da Hidrobomba com água no duche. Em todas as restantes ocasiões, a pequena protuberância preta deve estar na posição aberta. Não assegurar que a pequena protuberância preta está na posição aberta, impede a Hidrobomba de funcionar corretamente.

# Machine Translated by Google

Utilizar a sua Hidrobomba no Duche

Pode utilizar a cinta para o duche, deslizando o conector para a Hidrobomba, deixando as suas mãos livres para se lavar.

1. Relax no Duche durante alguns minutos.
2. Empurre e mantenha a protuberância preta na posição fechada com o seu dedo e coloque a Hidrobomba debaixo do chuveiro até estar cheia vody.
3. Enquanto mantém a protuberância preta na posição fechada, coloque a Hidrobomba sobre o seu penis flácido apertada contra o assoalho pélvico. O chanfro pode ser posicionado virado quer para cima, quer para baixo, dependendo do seu nível de conforto.
4. Crie vácuo contra o seu corpo, assegurando que o posicionamento é confortável e que os seus testículos estão bem afastados.
5. Com a Hidrobomba inclinada ligeiramente para cima, abra a válvula, soltando a protuberância preta e comece a bombear.
6. Assegure que a pequena protuberância preta está na posição central (aberta) quando bombeia.
7. Bombeie ligeira e uniformemente até os foles permanecerem pressionados, indicando que atingiu o máximo vácuo.
8. Assegure que segue as instruções recomendadas.
9. Para remover a Hidrobomba, alivie o vacuo pressionando a tampa da válvula para dentro para ativar o mecanismo de desbloqueio rápido e deslize a Hidrobomba para fora do penis.

Použijte a sua Hidrobomba no banho

1. Relax na banheira durante alguns minuts.
2. Encha a Hidrobomba com água do banho.
3. Coloque a Hidrobomba sobre o pénis flácido apertada contra o assoalho pélvico com a pequena protuberância preta na posição aberta. Ó chanfro pode ser posicionado virado quer para cima, quer para baixo, dependendo do seu nível de conforto.
4. Crie vácuo contra o seu corpo, assegurando que o posicionamento é confortável e que os seus testículos estão bem afastados.
5. Com a Hidrobomba ligeiramente inclinada para cima, assegure que a pequena protuberância preta está na posição aberta e comece a bombear.
6. Assegure que a pequena protuberância preta está na posição central aberta quando bombeia.
7. Bombeie ligeira e uniformemente até os foles permanecerem pressionados, indicando que atingiu o máximo vácuo.
8. Assegure que segue as instruções recomendadas.
9. Para remover a Hidrobomba, alivie o vacuo pressionando a tampa da válvula para dentro para ativar o mecanismo de desbloqueio rápido e deslize a Hidrobomba para fora do penis.

Čištění a údržba

Lave a sua Hidrobomba com água quente e sabão e enxagúe-a muito bem. Deixe a sua Hidrobomba secar e guarde-a num local seco afastado da luz solar direta.

Podpora pro klienty a záruka

A Hidrobomba Bathmate foi concebida para proporcionar muitos de utilização se problemas. Uma garantia de dois anos assegura cobertura contra peças com defeito ou deficiências na execução. Pode consultar o servis apoio ao cliente a informações detalhadas sobre and garantia em: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

Žádný případ zlepšení reklamace a záruky, společnost DX Products Ltd si vyhrazuje právo na právního zástupce a vývoj v oblasti Hidrobomba nebo na soudní rozhodnutí.

Identifikační kód produktu (CIP)

A DX Products Ltd používá identifikační kód pro všechny produkty. As Hidrobombas Bathmate possuem um código CIP único com 6 letras que se encontra na etiqueta da sua hidrobomba. Este código é a sua garantia de autenticidade e constitui prova de que está a adquirir um produto genuíno e não uma cópia falsificada de qualidade inferior.

Prosim, využijte náš CIP pro autenticar nebo naše produkty a zaregistrujte se a sua garantia online no nosso site: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

Bathmate Hydorpump представляет собой внешнее устройство на основе вакуумной технологии, обеспечивающее достаточную жесткость, необходимую для полового акта. Внимательно прочтите следующие инструкции.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важные предупреждения о безопасности

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного устройства, если у вас или у вас партнера есть что-либо из нижеследующего: симптомы эректильной дисфункции, диабета, рансета, рансета цирроза печени, хронической почечной недостаточности, алкоголизма, увеличенной сердечных сокращений а дыхательных движений, болезни сердца или легких, высокого артериального давления, инсульта, эпилепсии, расстройства мочеиспускательной системы (например, почками, мочевым пузырем или половыми органами) или лейкемии.
- Не используйте устройство, если:
  - Вы страдаете от серповидноклеточной анемии;
  - Вы неоднократно испытывали длительную эрекцию;
  - Вы страдаете от каких-либо нарушений гемостаза или в настоящий момент принимаете препараты типа аспирина.
- Устройство Hydorpump рассчитано на применение одним пользователем.
- Устройство Bathmate Hydorpump предназначено для использования в воде, поэтому не рекомендуется использовать его в какой-либо другой среде.
- Вы должны прилагать обеими руками достаточную силу, чтобы управлять механизмом вакуума. Если она окажется недостаточной, снять безопасным образом данное устройство будет сложно.
- Вам необходимо постоянно контролировать продукт, не позволяйте ему засыпаться устройством Hydorpump.
- Не используйте данное устройство, находясь под действием алкоголя или наркотиков. Вы не можете трезво оценивать ситуацию, а потому возрастает риск травмирования пениса.
- Никогда не используйте данное устройство, если у вас в области пениса наблюдаются покраснение, опухоль, боль или раздражение. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- Использование вакуумного насоса может вызвать повреждение или разрыв кровеносных сосудов или тканей и привести к петишиям, геморрагиям или образованию гематомы.
- Использование вакуумного насоса может усугубить хронические заболевания, такие как Peyronie's disease, priapism и стриктуры мочеиспускательного канала.
- Неправильное использование данного устройства может привести к травмированию пениса.
- В случае возникновения сильной боли или дискомфорта немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

## НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуемое использование

Для извлечения оптимальной пользы из устройства Hydorpump и предотвращения его нежелательного использования, которое может вызвать дискомфорт, вам настоятельно рекомендуется следовать изложенным ниже инструкциям:

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:** помойте гидронасос в теплой чистой водой тщательно его ополосните. Убедитесь, что вы достаточно хорошо подстригли лобковую область. Это обеспечит более плотное прилегание вакуумного уплотнения к телу.

- Период расслабления в течение нескольких минут в душе необходим для того, чтобы мышцы и не прилегали к области уплотнения, таким образом, вы не будете испытывать дискомфорт.
- Применяйте только минимальное давление вакуума, необходимое для достижения эрекции. Чрезмерное давление вакуума и слишком интенсивное накачивание может привести к повреждению или травмированию пениса.
- **Ротомате nám!** устройством каждые 2-3 минуты и давать пенису отдых. Массируйте пенис в незарегистрированном состоянии в течение 2 минут, затем немедленно повторяйте процесс. Не совершайте эту процедуру более 3 раз за 15-минутную сессию.
- Не используйте Hydorpump более 15 минут в течение суток.

## Как Hydorpump

Принцип работы Hydorpump заключается в создании вакуумного уплотнения, охватывающего пенис в незарегистрированном состоянии, в области соприкосновения устройства и тела пользователя. Когда насос прижимают к телу, сильфон сжимается, а вода выходит из устройства клапаном. Когда насос отпускают, сильфон расширяется, а клапан закрывается, создавая вакуум. Он заставляет пенис расширяться и наполняться кровью, приводя его в зарегистрированное состояние. Повторная накачка увеличивает вакуум и усиливает эрекцию.

Пользователь контролирует уровень вакуума путем нажатия на клапан и преодоления сопротивления пружины, через открытый клапан воздух и вода поступают обратно в корпус насоса, полностью сбрасывая вакуум.

Вакуум в устройствах Bathmate Hydorpump поэтому пользователь не сможет превысить безопасный уровень частичного вакуума европейскими и американскими медицинскими правилами.

## ВАЖНО

Черный дозатор верхней части клапана движется путем нажатия на него и удерживается в закрытом положении. Переводите его в закрытое положение следует только в случае наполнения Hydorpump воздухом. Все остальное время черный дозатор должен всегда оставаться открытым. В противном случае Hydorpump будет работать некорректно.

# Machine Translated by Google

## Использование Hydromp в душе

В душе вы можете использовать специальный ремень, прикрепив его соответствующим образом и тем самым освободив руки для мытья.

1. Расслабьтесь в душе в течение нескольких минут. 2.

Нажмите пальцем на черный дозатор а удерживайте его в закрытом положении, Hydromp а наполните водой из sprchové leky.

3. Продолжая удерживать черный дозатор в закрытом положении, поместите Hydromp на поместите Hydromp на по незарегированном состоянии так, чтобы сильфон плотно прилегал к тазу. Камеру можно как приподнять, так и немного опустить – в зависимости от вашего потогосте

4. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телодиштус телоди положение первого не вызывает у вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе.

5. Немного приподнимите Hydromp, откройте клапан, высвободив черный дозакатор, и начеинат

6. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положенирики во

7. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется, сжатом полон на то, что создан оптимальный vakuim.

8. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям. 9. тобы

снять Hydromp, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydromp с пениса.

## Использование Hydromp ванной

1. Расслабьтесь ванной в течение нескольких минут.

2. Наполните Hydromp водой из ванны.

3. Поместите Hydromp на пенис в незарегированном состоянии так, чтобы сильфон плотногаино черный дозатор находился в открытом положении. Камеру можно как приподнять, так немного опустить – в зависимости от вашей стем.

4. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телодиштус телоди положение первого не вызывает у вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе. 5.

Немного приподнимите Hydromp, убедившись, что черный дозатор находится в опотикры начинайте качать.

6. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном открытом положеникимово

7. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется, сжатом полон на то, что создан оптимальный vakuim.

8. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям.

9. Чтобы снять Hydromp, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydromp с пениса.

## Чистка и обслуживание

Мойте Hydromp в теплой чистой мыльной воде, а затем тщательно его ополаскивайте. Давайте Hydromp высохнуть и храните его в сухом месте, защищенном от прям солнечных

## Обслуживание клиентов а гарантия

Bathmate Hydromp рассчитан на долгие годы безотказной работы. На него распространяется двухгодичная гарантия при обнаружении дефектных деталеле некачественной сборки. С условиями обслуживания клиентов а гарантии можно ознакомиться на сайте: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support).

В случае маловероятного возникновения претензий по гарантии DX Products Ltd оставляет за совобревев возврата Hydromp а предъявления доказательств по факту повреждений.

## Код идентификации продукта (PID)

DX Products Ltd. На этикетке каждого устройства Bathmate Hydromp вы найдете уникальный PID-код из 6 букв. Данный код является гарантией подлинности и доказательством того, что вы покейности продукт, а не его некачественную поддельную копию. Просьба использовать PID-код для проверки подлинности продукта и регистрацириегараннририегараннрики naleznete на náš stránce: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support).

.

.

- - -  
.

.

.

.

.

.

• 23 2 15 3

• 2415

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

2

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

Produkty DX produkty Ltd.

PID Produkty  
DX Ltd 6PID

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

## Machine Translated by Google

Koupelna Hydropump 是一款采用了真空技术的阴茎硬度外用装置，可创造出性交所需的充分阴茎硬度。请仔细阅读以下说明

在开始之前

重要的安全警告

- 
- 
- Hydropump • Hydropump
- Bathmate • • Hydropump • • • •
- 

开始使用

推荐使用

Hydropump

首次使用前 Hydropump • • • • 2-3 2  
15 3

- 24 Hydropump 15

Hydropump 的工作原理

Hydropumpa Bathmate

重要事项

Hydropump

在淋浴中使用您的 Hydropump

- 1.
  - 2.
- Hydropump
3. Hydropump
  - 4.
  5. Hydropumpa
  - 6.
  - 7.
  9. Hydropump

在浴室中使用您的

- 1.
2. Hydropump
3. Hydročerpadlo
- 4.
5. Hydropumpa
- 6.
- 7.
9. Hydropump Hydropumpa.

清洁和维护

Hydropump Hydropump Hydropump

客户服务与保修

Hydropumpa Bathmate

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

DX Products Ltd Hydropump

产品识别码 (PID)

DX Products Ltd Bathmate Hydropump 6 PID Hydropump  
PID

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)



## Machine Translated by Google

在淋浴中使用 Hydropump

您可以在

1. 2. Hydropump

3. Hydropump 4.

5. Hydropump

6.

7. 8 8 9. Hydropump Hydropump

在浴缸中使用

1.

2. Hydropump

3. Hydročerpadlo

4.

5. Hydropumpa

6.

7. 8 8

9. Hydropump

清潔和維護

Hydropump Hydropump

客戶服務與保修

Hydropumpa Bathmate

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

DX Products Ltd Hydropump

產品識別碼

DX Products Ltd Hydropump Bathmate 6 Hydropump PID

PID

[www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

# Machine Translated by Google

Průvodce řešením problémů: anglicky

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	LÉK	KOMENTÁŘE
Žádná erekce	Žádné vakuum kvůli uniknutí vzduchu způsobenému špatným těsněním	Pevně přitlačte na tělo; zastříhnete ochlupení; zkontrolujte, zda ze zařízení neuniká vzduch. se, jakmile se stanete zručnějšími v používání zařízení.	Problém je nejčastěji spojen s nezkušeností; vyřeší používáním zařízení.
Částečná erekce	Nesprávná velikost válce; nesprávná vložka; nedostatek cvičných cvičení	Více praxe s používáním zařízení; použijte větší vložku válce	Problém se nejčastěji zlepšuje s dalším používáním zařízení
Stahování kůže šourku	Nesprávná technika čerpání; příliš velká vložka; nezkušenost se systémem	Použijte menší vložku; použijte upravenou techniku odsávání (poradte se s lékařem); pokračujte v procvičování; během odsávání nakloňte válec dolů	Problém je nejčastěji spojen s nezkušeností; vyřeší se, jakmile se stanete zručnějšími v používání zařízení
Nepohodlí nebo bolest			
Během čerpání	Příliš rychlé pumpování; tahání šourkové tkáně	Pomalejší odsávání; pokračujte v používání zařízení	Problém se obvykle vyřeší, jakmile se v používání zařízení stanete zručnějším.
Zarudnutí, podráždění nebo modřiny	Příliš rychlé čerpání; přečerpávání	Pomalejší čerpání; méně čerpadel	Pokud tento problém přetrvává i po prvních několika cvičebních sezeních, poradte se s lékařem.

Průvodce dépannage: Français

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ	KOMENTÁŘE
Pas d'erection	Aucune aspiration en raison d'une fuite d'air kvůli à une mauvaise étanchéité	Appuyez fermement sur le corps ; taillez les poils pubiens ; recherchez les fuites d'air sur le dispositif	Le problème est souvent associé à un manque d'expérience ; il disparaît à mesure que vous vous familiarisez avec le dispositif
Částečná erekce	Taille de cylindre nesprávné; embout nesprávný ; séances d'entraînement insuffisantes	Pratquez davantage avec le dispositif ; utilisez un embout de cylindre plus grand	Le problème est souvent corrigé par un use continu du dispositif
Traction sur la peau du scrotum	Technique de pompage inappropriée ; embout trop grand ; manque d'expérience avec le système	Utilisez un embout plus petit ; modifiez la technique de pompage (consultez votre médecin à cet effet) ; continuez les sessions de pratique ; inclinez le cylindre vers le bas durant le pompage	Le problème est souvent lié à un manque d'expérience ; il se corrige à mesure que vous vous familiarisez avec le dispositif
Nepohodlí nebo bolest			
Durant le pompage	Pompage trop rapide ; tracciones sur la peau du scrotum	Pompage plus pùjtil ; pokračovat z à utiliser le dispositif	Le problème disparaît habituellement à mesure que vous vous familiarisez avec le dispositif
Rougeurs, podráždění nebo ekchymózy	Pompage trop rapide ou excessif	Pompage plus pùjtil ; moins de pompage	Consultez votre médecin si le problème persiste après quelques seances d'entraînement

Anleitung zur Problemlösung: Deutsch

PROBLÉM	WAHRSCHEINLICHE MURSACHE	ABHILFE	OZNAČENÍ
Bez erekce	Kein Unterdruck aufgrund Luftverlust durch unzureichende Abdichtung	Kräftigen Druck auf den Körper ausüben; Schamhaare kürzen; Vorrichtung auf Luftaustritte untersuchen	Problém tritt meist mit Unerfahrenheit auf; je geschickter Sie bei der Verwendung der Vorrichtung werden, desto seltener tritt dieses Problem auf
Částečná erekce	Falsche Zylindergröße; falscher Einsatz; nevdávát se Tréninkové výhody	Öfteres Verwenden der Vorrichtung; Použití většího Zylinderreinsatzes	Das Problem verschwindet meist bei öfterer Verwendung der Vorrichtung
Ziehen an der Haut des Hodensacks	Falsche Pumptechnik; zu großer Einsatz; Unerfahrenheit mit der Vorrichtung	Kleineren Einsatz verwenden; andere Použití čerpací techniky (tzv. Ihren Arzt aufsuchen); Trainingseinheiten fortsetzen; Zylinder beim Čerpadlo dole	Das Problem kann verschwinden, da Sie bei der Verwendung der Vorrichtung geschickter werden. Siehe visuelle Anleitung für korrekte Anwendung der Vorrichtung
Unbehagen nebo Schmerzen			
Beim Pumpen	Zu schnelles Pumpen; Ziehen jsem Hodensack	Langsamer pumpen; Vorrichtung weiterhin verwenden	Das Problem löst sich in der Regel, da Sie bei der Verwendung der Vorrichtung geschickter werden
Rötungen, Reizungen nebo Ergussbildungen	Zu schnelles Pumpen; übermäßiges Pumpen	Langsamer pumpen; weniger Čerpadlový provoz	Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn dieses Problem nach den ersten Trainingseinheiten weiterhin besteht.

# Machine Translated by Google

Řešení problému: Español

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ	KOMENTÁŘE
Nedochází k erekci	No se está creando vacío por una fuga de aire causada por un sellado deficiente	Aplique a su cuerpo una presión firme; afétese el vello púbico; compruebe si el dispositivo presenta fugas de aire	Este problema suele estar relacionado con la falta de experiencia; se soluciona a medida que se vaya acostumbrando al uso del dispositivo
Částečná erekce	El tamaño del cilindro no es el adecuado; el disco de inserción no es el adecuado; no ha practicado lo dostáčující	Necesita más práctica de uso del dispositivo; utilice un disco de inserción más grande	Tento problém je hlavní s používáním continuado del dispositivo
Tirones en la piel del escroto	Técnica de bombeo nesprávná; diskotéka de inserción demasiado grande; poca práctica de uso	Utilice un disco más pequeño; utilice una técnica de bombeo distinta (consúltelo con su médico); siga practicando; el ángulo del cilindro se encuentra hacia abajo durante el bombeo	Je možné, že problém je desaparezca a medida que se vaya adaptando al uso del dispositivo
Malestar nebo bolest			
Durante el bombeo Bombeo demasiado rápido; tirones en escroto clona		Bombee más despacio; siga practicando	El problema suele solucionarse a medida que se adapte al uso del dispositivo
Enrojecimiento, irritación a contusiones	Bombeo demasiado rápido; bombeo excesivo	Bombeo más lento; menos bombeo Consulte a su	medico si el problema persiste después de las primeras sesiones prácticas

Pokyny pro řešení problému: itaština

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBŇNÁ PŘÍČINA	RIMEDIO	KOMENTÁŘE
Nessuna erezione	Nessun vuoto causato da perdita d'aria per via di un'aderenza scarsa	Esercitare saldamente pressione al corpo; depilare l'area pubica; verificare la perdita d'aria del dispositivo	Il problema è spesso associato all'inesperienza; si risolve diventando più esperti con l'uso del dispositivo
Erezione parziale	Dimensione errata del cilindro; inserimento scorretto; sessioni pratiche nedostáčující	Più pratica con il dispositivo; používatme cilindrico più grande	Il problema di normala migliora con l'uso FAQe del dispositivo
La pelle dello scroto viene tirata	Tecnica di pompaggio errata; inserto troppo ampio; inesperienza con il system	Usare un inserto più piccolo; usare una diversa tecnica di pompaggio (consultare un medico per questo); continuare le sessioni pratiche; cilindro angolare rivolto verso il basso durante il pompaggio	Il problema scompare con una maggiore esperienza nell'uso del dispositivo. Consultare la guida visiva per l'uso corretto
Fastidio o molesti			
Během pompaggia	Pompaggio troppo rapido; il tessuto dello scroto viene tirato	Pompaggio più lento; continuare a usare il dispositivo	Il problema di normala and risolve con una maggiore esperienza nell'uso del dispositivo
Rossore, podráždění nebo ematom	Pompaggio troppo rapido; pompaggio eccessivo	Pompaggio più lento; meno pompaggi	Consultare il medico se il problema persiste anche dopo le prime sessioni pratiche




Řešení problému: Português

PROBLÉM	PŘÍČINA PROVÁVEL	ŘEŠENÍ	KOMENTÁŘE
Bez erekce	Sem vácuo devido a fuga de ar causada por má selagem	Aplique pressão Firme no corpo; apare os pelos púbicos; verifique eventuais fugas de ar no dispositivo	O problema está Frostemente associado à inexperiência, solucionando-se à medida que se torna mais apto na utilização do dispositivo
Částečná erekce	Tamanho incorreto do cilindro; inserção incorreta; sessões de prática insuficientes	Mais prática na utilização do dispositivo; využit uma inserção maior do cilindro	Na maioria das vezes, o problema soluciona-se com o uso contínuo do dispositivo
Puxão da pele do escroto	Técnica de bombeamento inadequada; inserção demasiado grande; nekušnost se systémem	Využitve uma inserção mais pequena; využit técnica de bombeamento modificada (consulte o seu médico a este respeito); pokračovat com jako sessões práticas; sklon o cilindro para baixo durante o bombeamento	O problema está Frostemente associado à inexperiência, solucionando-se à medida que se torna mais apto na utilização do dispositivo
Nepohodlí nebo dveře			
Během bomby	Bombeamento demasiado rápido; arrastamento do tecido escrotal	Bombeamento mais lento; pokračovat a usar nebo dispositivo	O problema geralmente é solucionado à medida que se torna mais apto na utilização do dispositivo
Vermelhidão, irritação nebo hematom	Bombeamento demasiado rápido; bombeamento pfehnáné	Bombeamento mais lento; menos bombeamentos	Consulte o seu medico caso este problema persista após as primeiras sessões de prática



## JAK SPRÁVNĚ SEJMUT VENTILKOVÝ UZÁVĚŘ

Pravidelné používání hydročerpadla nevyhnutelně povede k hromadění cizích předmětů uvnitř ventilu, což může vést ke ztrátě...  
sání. Pravidelné odstraňování víčka ventilu z hydročerpadla a jeho důkladné čištění zabrání usazování usazenin a pomůže  
zajistit, aby fungoval na plný potenciál.

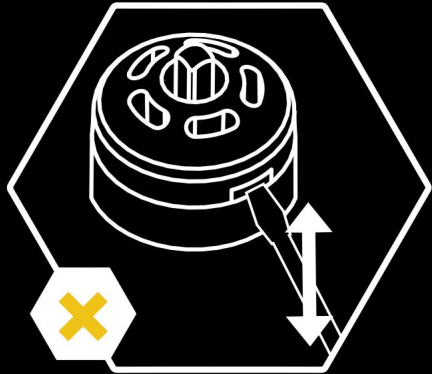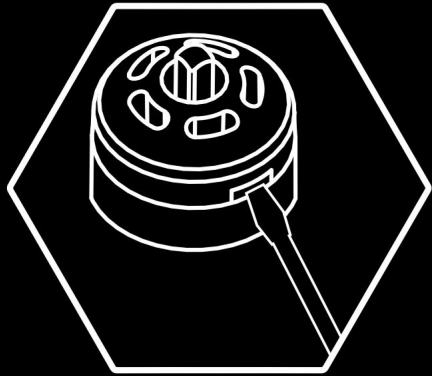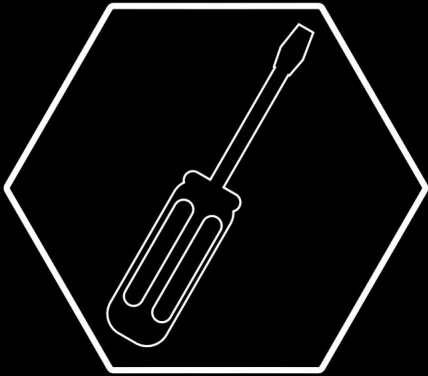

CZ. Při odstraňování krytky ventilu za účelem čištění se ujistěte, že je šroubovák otočený a NENÍ stlačený. —

FR. Afin de décapuchonner votre capuchon de valve pour le nettoyage, sarez-vous de tourner le tournevis à droite et à gauche mais SANS faire levier.

DE. Beachten Sie beim Abnehmen der Ventilkappe vor der Reinigung bitte, dass Sie den Schraubenzieher nur drehen sollten und die Kappe NICHT damit hochdrücken dürfen.

TO. Quando si rimuove il tappo della valvola a scopo di pulizia, assicurarsi che il giravite venga ruotato a NON sollevato.

ES. Cuando docela la tapa de la válvula para su limpieza, asegúrese de que gire el destornillador y NO haga palanca.

PT. Quando remover a sua tampa da válvula para efeitos de limpeza, certifique-se que a chave de fendas é rodada e NÃO pressionada na vertical.

RU. При снятии колпачка клапана для очистки необходимо выкручивать его отверткой, а приподнимать.

JP.

CN.

CN.

## DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO

Všechny produkty Bathmate Hydropump jsou vyrobeny ze speciálně vybraných materiálů bezpečných pro pokožku, bez ftalátů a v lékařské kvalitě. Každá řada prošla speciálně navrženou dermatologickou testovací studií provedenou světově renomovanou specializovanou klinikou. Princeton Consumer Research jednoznačně schválila naše Hydropump jako:

„Klinicky prokázána bezpečnost použití v intimní oblasti genitálií.“

Můžete si být jisti, že hydročerpadla Bathmate jsou bezpečná k použití



## NALEPTE BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKU



### Registrace záruky a identifikační kód produktu (PID)

Všechna hydročerpadla Bathmate jsou podporována dvouletou zárukou a nesou šestispisemenný unikátní PID kód, který je vaším... zárukou pravosti a důkaz, že kupujete originální produkt Bathmate, nikoli nekvalitní padělek.

Svůj PID regulátor a záruku na hydročerpadlo si můžete snadno ověřit online na adrese: [www.bathmatedirect.com/support](http://www.bathmatedirect.com/support)

Nebo zašlete údaje o vašem jménu, adrese a PID a sériovém čísle hydročerpadla na níže uvedenou adresu.

Bathmate® a Hydromax® jsou celosvětově registrované ochranné známky.

Bathmate: EU 005210244, USA 3789395, Čína 10221454 Hydromax: EU 010390904, USA 4303440, INT 1131156 Design

Registrace: EU 002111069/2, USA 29/450986 Patenty: UK 2418686 EU 1799162, USA 7651463, AU 2005278999

Více informací naleznete na webových stránkách nebo nám napište e-mail na adresu: [support@bathmatedirect.com](mailto:support@bathmatedirect.com)

© Celosvětová ochrana autorských práv - DX Products Ltd

Vyrobeno ve Spojeném království společností DX Products Ltd Unit 1, Horbury Jct Ind Est. Calder Vale Rd, Horbury, Wakefield, WF4 5ER, Spojené království

+44 (0) 800 808 5594

[support@bathmatedirect.com](mailto:support@bathmatedirect.com)